

Pneumatische Stanze für Probenstifte HSA



**EINFACHES ABSCHEREN VON STIFTEN
FÜR STAHLPROBEN**

HERZOG



PNEUMATISCHE STANZE HSA – FÜR LABOR UND FERTIGUNG

Einfaches Abscheren der Stifte von Stahlproben aus Probenahmesonden, das bietet die pneumatische Stanze HSA. Sie ist einsetzbar für alle üblichen Probenformen wie runde und ovale Probenkörper oder Doppel-Medaillen.

Durch die äußerst robuste Bauweise ist die pneumatische Stanze HSA nicht nur für den Laborbetrieb die richtige Entscheidung. Sie kann auch dort betrieben werden, wo die Proben gewonnen werden – im harten Einsatz direkt vor Ort.

LEICHTES HANDLING, PRÄZISE ARBEITSWEISE

Die Proben werden ganz einfach von Hand in den Stanzbereich geführt und der Arbeitsgang über einen Fußschalter gestartet.

Die pneumatische Arbeitsweise trennt den Angußstift schnell, leicht und ohne jeglichen Kraftaufwand unmittelbar am Probenkörper ab. Das Abscheren erfolgt mit konstanter Präzision und so genau, daß keine Nachbearbeitung nötig ist.

SICHERES ARBEITEN

Die Maschine ist vollkommen geschlossen. Ein Wegspringen der Stifte beim Abschervorgang ist nicht möglich. Das schützt vor Verletzungen und garantiert sicheres Arbeiten.

Die abgescherten Stifte werden im Maschinengehäuse in einer mit wenigen Handgriffen herausnehmbaren Sammellade aufgefangen.

TECHNISCHE DATEN

Farbe: grau, RAL 7004

Beschriftung: deutsch

Betriebsanleitung: 1fach, deutsch

Abmessungen L x B x H

Abmessung ohne Tisch:

400 x 715 x 1.311 mm

Gesamtabmessung inkl. Verpackung:

800 x 900 x 1.700 mm

Gewicht

Nettogewicht: 105 kg

Gewicht inkl. Verpackung: 235 kg

Druckluftversorgung und -verbrauch

Verbrauch: ca. 10 l pro Probe

Anschlußstutzen: dN = 13 mm

Die Ausführung der Maschine entspricht den geltenden UVV- und VDE-Vorschriften.


Technische Änderungen vorbehalten.

Probeneingabe
mit Abschereinrichtung

Sammellade
für Probenstifte

Pneumatik-Zylinder

Fußschalter

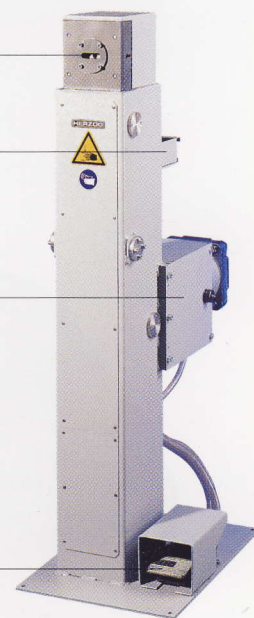

HERZOG MASCHINENFABRIK GMBH & CO.

Auf dem Gehren 1
D-49086 Osnabrück-Lüstringen
Telefon (05 41) 93 32-0
Telefax (05 41) 93 32 32

HERZOG AUTOMATION CORP.

16600 Sprague Road
Cleveland, Ohio 44130, USA
Telefon 216-891 9777
Telefax 216-891 9778

HERZOG JAPAN LTD.

5-8, Funado, 3-chome,
Itabashi-ku, Tokyo 174
Telefon 03-5994-0273
Telefax 03-3967-2224

HERZOG